

---

# Image-Pro Insight ver. 8.0 (英語版) for Windows

## インストール手順

---


©2004-2012 Media Cybernetics, Inc./ (株)日本ローパー

Image-Pro Insight をお選びいただき、誠に有り難うございます。

Image-Pro Insight ver. 8.0 英語版のインストールは、本書の手順で行なって下さい。

Image-Pro Insight 本体のインストールには、次のインストール用 CD とプロテクトキーをご使用下さい。

- Image-Pro Insight Version 8.0 Program インストール用 CD  
"Windows XP Pro SP3 Windows Vista Business 32- and 64-bit editions  
Windows Vista Ultimate 32- and 64-bit editions"

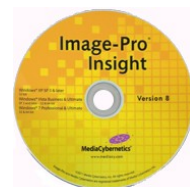

- Image-Pro Insight Version 8.0 プロテクトキー



インストールに先立って、本ソフトウェアのライセンス契約をお読み頂き、ご同意頂く必要があります。ライセンス契約は、本製品に付属の「Image-Pro Insight 基本操作マニュアル」をご覧ください。

本ソフトウェアの動作環境につきましては、本書の [2](#) ページをご覧ください。

ソフトウェアのユーザー登録と技術サポートの連絡先につきましては、「Image-Pro Insight 基本操作マニュアル」をご覧ください。

本ソフトウェア本体のインストール手順は、[2](#) ページ以降をご覧ください。

▶**注記**◀ カメラ等から Image-Pro Insight へ画像を直接取り込んで使用される場合は、本ソフトウェアのインストール後に、使用機器（デジタルカメラ、画像取り込みボード等）のデバイスドライバソフトの最新バージョンを、Image-Pro 開発元のホームページ (<http://support.mediacy.com/drivers.asp>) などからダウンロードしてインストールして下さい ([12](#)ページ)。なお、Image-Pro Insight で使用できるカメラ機種の一覧は、次をご覧ください。 [http://www.mediacy.com/index.aspx?page=IP\\_Insight\\_hardware](http://www.mediacy.com/index.aspx?page=IP_Insight_hardware)

## ▼ 目次

Image-Pro Insight ver. 8.0 の動作環境 .....	<a href="#">2</a>
Image-Pro Insight ver. 8.0 のインストール手順 .....	<a href="#">2</a>
プロテクトキー (不正コピー防止キー) のインストール .....	<a href="#">7</a>
初回起動 .....	<a href="#">8</a>
自動アップデート機能について .....	<a href="#">10</a>
画像取り込みドライバのインストールについて .....	<a href="#">12</a>
トラブルシューティング .....	<a href="#">13</a>
その他の情報 .....	<a href="#">17</a>

## ▼ Image-Pro Insight ver. 8.0 の動作環境

Image-Pro Insight ver. 8.0 (英語版) の動作環境は以下の通りです。

Image-Pro Insight バージョン	対応 OS	CPU	実装メモリ	ハードディスク空き容量
8.0 (英語版)***	Windows® XP Professional (32ビット) Service Pack 3 以降*	Pentium 4/ AMD Athlon 64 以上**	2 GB***	20 GB****
	Windows® Vista Business/Ultimate (32/64 ビット) Service Pack 2 以降*		2 GB***	20 GB****
	Windows® 7 Professional/Ultimate (32/64 ビット)*		2 GB***	20 GB****

\* Microsoft .NET 3.5 Framework が必要です (Image-Pro Insight のインストール時に自動的にインストールされます)

\*\* デュアルコア CPU またはマルチコア CPU を推奨します。

\*\*\* 4 GB 以上を推奨します。

\*\*\*\* 高精細画像データを保存することを考慮すると、20 GB 以上の空き容量を推奨します。


- SVGA 以上、24 ビットフルカラー以上 (32 ビットフルカラー以上を推奨) のモニタ、および 32MB 以上のメモリを搭載した OpenGL アクセラレータ機能付きグラフィックスカード (2 次元テクスチャ付き)。
- DVD/CD-ROM ドライブ
- USB (ユニバーサルシリアルバス) ポート: Image-Pro Insight のプロテクトキー (不正コピー防止キー) をこのポートに取り付けます。
- インターネット接続: オンラインサービスを受けられる場合、インターネット接続環境が必要です (インターネット接続環境がなくてもソフトの使用は可能ですが、インターネット経由でのチュートリアルヘルプ、自動アップデートサービス (10 ページ) 等) は利用できません)。
- 対応カメラの機種は、[http://www.mediacy.com/index.aspx?page=IP\\_Insight\\_hardware](http://www.mediacy.com/index.aspx?page=IP_Insight_hardware) をご覧ください。

## ▼ Image-Pro Insight ver. 8.0 のインストール手順

Image-Pro Insight ver. 8.0 (英語版) をインストールするときは、以下の手順に従って下さい。

### ▶注記◀


- 必ず Administrator (管理者) 権限でログオンしてから以下の操作を行なって下さい。管理者権限でない場合、正しくインストールできません。
- Image-Pro Insight のインストールを始める前に、あらかじめ抗ウイルスソフトや他のアプリケーションソフトを全て終了しておいて下さい。特に抗ウイルスソフトを動作させたままインストールすると、インストールが不完全になることがありますので、必ず終了して下さい。終了する方法は、抗ウイルスソフトのマニュアルをご覧ください。終了する方法がわからない場合は、タスクマネージャで強制終了できます。Windows のタスクバーを右クリックして、コンテキストメニューから「タスクマネージャ」を選択し、起動します。「アプリケーション」タブや「プロセス」タブで終了したい抗ウイルスソフト等を選択し、「タスクの終了」ボタンをクリックします。
- プロテクトキー (右図) は、この時点ではまだパソコンに装着しないで下さい。プロテクトキーの装着は、ソフトのインストール後に行ないます。

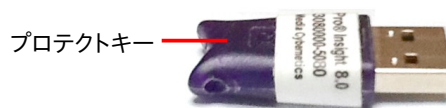

1. パソコンを起動し、必ず Administrator (管理者) 権限でログオンして下さい。
2. 抗ウイルスソフトなどのメモリ常駐ソフトを含む、全てのソフトを終了して下さい。  
▶**注記**◀ 特に抗ウイルスソフトは、Image-Pro Insight のインストールに悪影響を与える可能性が高いので、必ず終了して下さい。
3. Image-Pro Insight Version 8.0 インストール用 CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。



【Windows Vista/Windows 7 のみ】 次のような画面が開いたら、「autorun.exe の実行」ボタンをクリックして下さい。

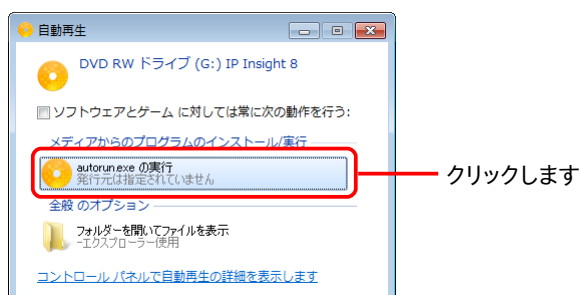

【Windows Vista/Windows 7 のみ】 「ユーザーアカウント制御 … 次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?…」と表示されたら、「続行」ボタンまたは「はい」ボタンをクリックして下さい。




インストールブラウザが自動的に起動し、次の画面が開きます。



▶**注記**◀ インストールブラウザが自動的に起動しないときは、Windows のエクスプローラでインストール用 CD-ROM を開き、中の "autorun.exe" ファイルをダブルクリックして起動して下さい。

4. インストールブラウザの画面で、"Install Insight" ボタンをクリックします。これでセットアッププログラムが起動します。

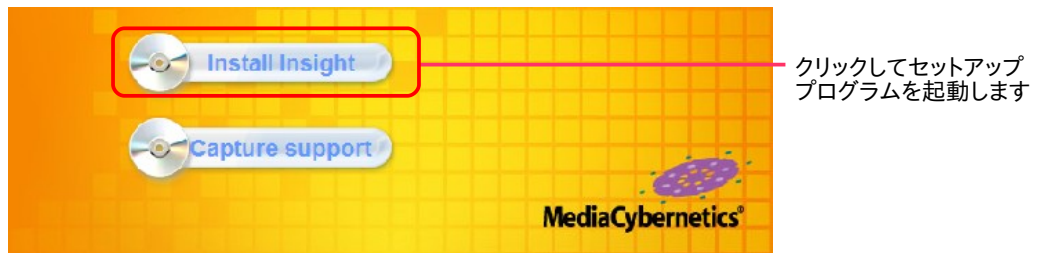

5. Image-Pro Insight には Microsoft .NET framework 3.5 が必要です。これがパソコンにインストールされていない場合は、ここで「Microsoft .NET Framework 3.5 セットアップ」画面 (下図) が開きますので、画面の指示に従ってインストールして下さい。




NET Framework 3.5 がインストール済みの場合は、上の画面が表示されませんので、このまま手順 6. へ進みます。


▶注記◀ .NET Framework のライセンス条項に同意されない場合は、.NET Framework と Image-Pro Insight のインストールが中断します。

6. これ以降は、Image-Pro Insight の本体をインストールします。


"Installing Image-Pro Insight..." と表示された後、数十秒から数分間、"Extracting..." と表示されます。

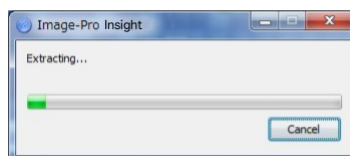

"Welcome to the Image-Pro Insight Setup" 画面が開いたら、"Next" ボタンをクリックします。

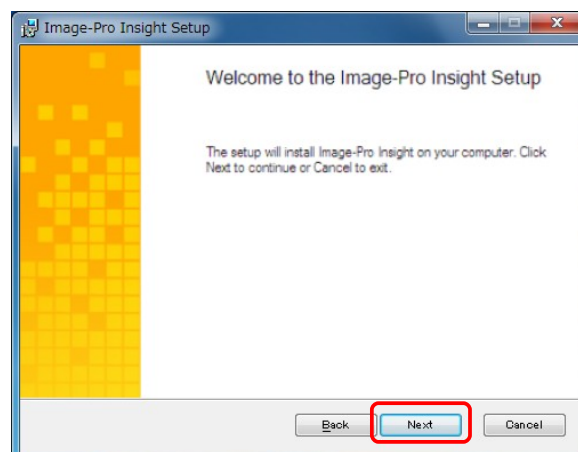


7. "End-User License Agreement" 画面のライセンス契約 (この英文の和訳は、「Image-Pro Insight 基本操作マニュアル」の3ページをご覧ください) をお読みいただき、内容に同意される場合は "I accept the terms of this License Agreement" を選択してから "Next" をクリックして下さい。

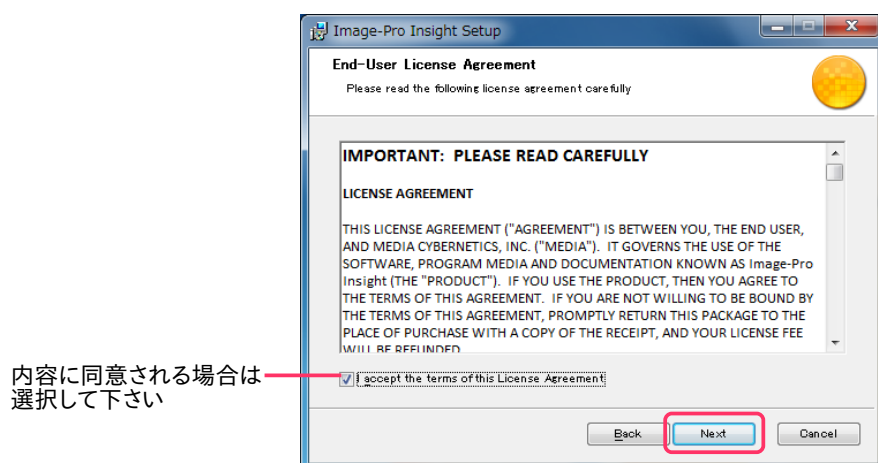

▶注記◀ ライセンス契約に同意されない場合は、Image-Pro Insight のインストールが中断します。

8. "Destination Folder" (インストール先のフォルダ) 画面が表示されます。

この画面では、Image-Pro Insight のインストール先を指定し、また Image-Pro Insight を使用するユーザーアカウントを指定します。

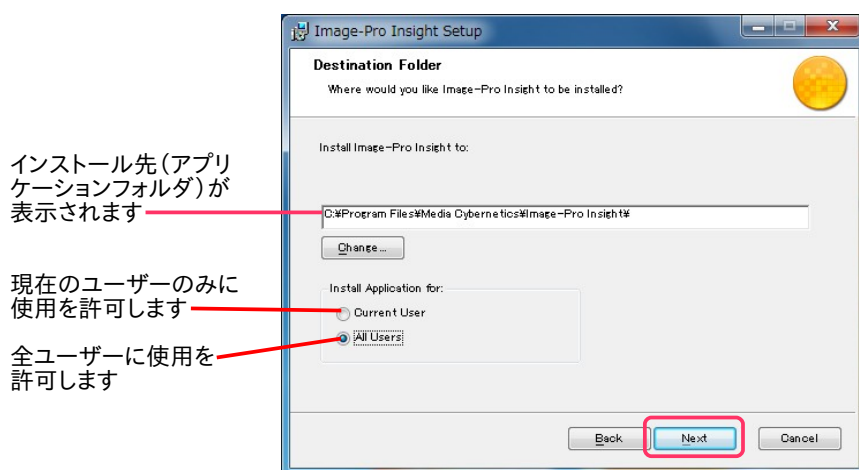

中央の欄に、Image-Pro Insight 本体のデフォルトのインストール先 ("C:\Program Files\Media Cybernetics\Image-Pro Insight\") が表示されています。この場所が Image-Pro Insight のアプリケーションフォルダになります。通常は、デフォルトのインストール先にインストールして下さい。

次に、"Install Application for" (このアプリケーションの使用者) 欄で、次のいずれかのオプションを選択して下さい。


- "Current User" (現在のユーザー専用): このオプションを選択すると、Image-Pro Insight が現在ログオン中のユーザー専用としてインストールされます (同じパソコンの他のユーザーアカウントからは使用できなくなります)。
- "All Users" (全ユーザー用): このオプションを選択すると、Image-Pro Insight がパソコン内の全ユーザーアカウントから使用可能になります。

以上を設定したら、"Next" をクリックして下さい。



9. 再度 "Destination Folder" (インストール先のフォルダ) 画面が表示されます。

付属データのインストール先が表示されます

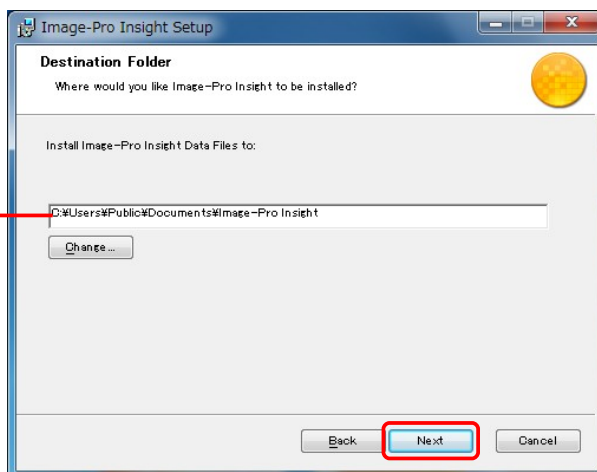

今度は、中央の欄に、付属データのデフォルトのインストール先 (上図の例では、"C:\Users\Public\Documents\Image-Pro Insight") が表示されています。この場所は、Image-Pro Insight の付属データ (サンプル画像、各種設定ファイルなど) の保存先となります。通常は、デフォルトのインストール先のままにしておいて下さい。

"Next" ボタンをクリックして下さい。

10. "Ready to install Image-Pro Insight" 画面が表示されます。確認のために、Image-Pro Insight 本体のインストール先と、サンプル画像などの付属データのインストール先が表示されます。

"Install" ボタンをクリックして、インストールを開始して下さい。


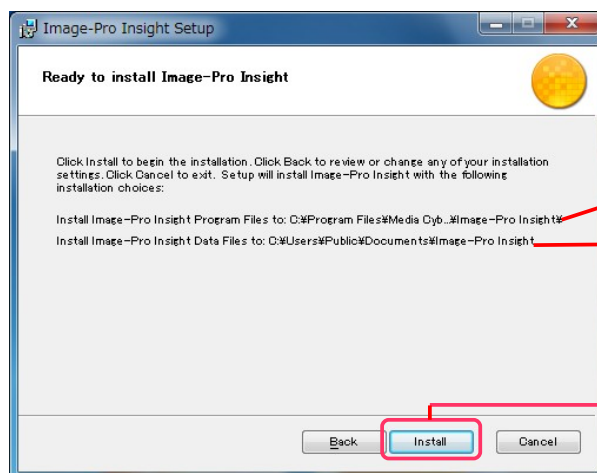



Image-Pro Insight 本体のインストール先  
付属データのインストール先

クリックします

"Installing Image-Pro Insight" 画面が開き、インストールの進捗状況が表示されます。

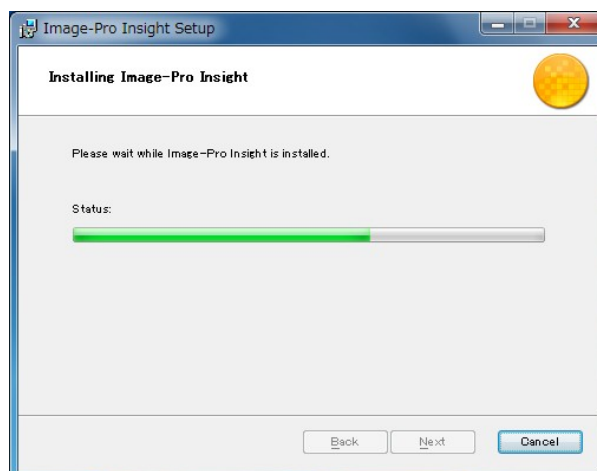


▶注記◀ インストール中に次の画面が表示された場合は、"OK" ボタンをクリックして先へ進んで下さい。

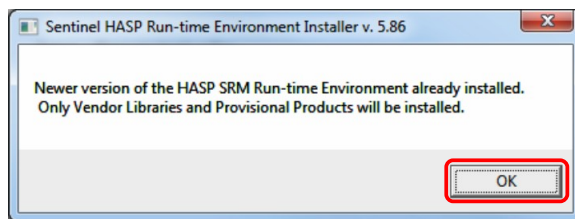


11. "Completed the Image-Pro Insight installation" 画面が表示されます。

"Launch Image-Pro Insight" オプションをクリックして非選択にして下さい。

その後、"Finish" ボタンをクリックして下さい。

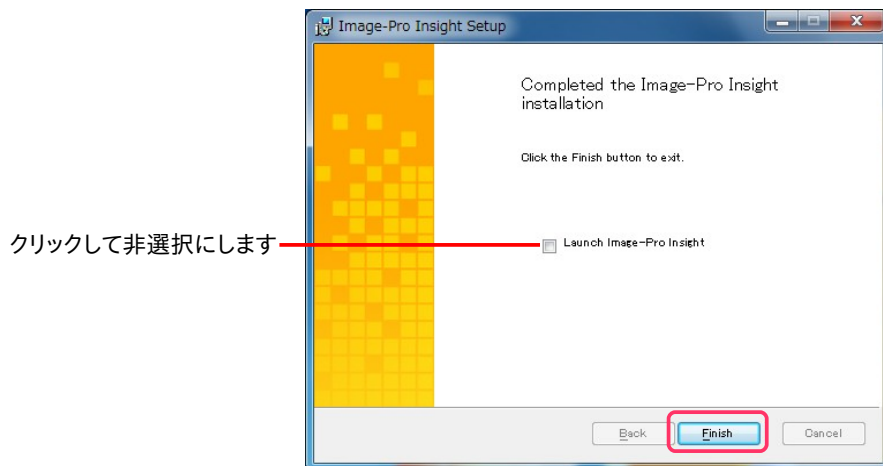

12. インストールブラウザの画面の右上角にある「閉じる」ボタン (  ) をクリックします。



クリックして、インストールブラウザを閉じます


これで、Image-Pro Insight 本体のインストールは完了です。

引き続き、次の手順でプロテクトキーをインストールして下さい。

## プロテクトキー (不正コピー防止キー) のインストール

13. プロテクトキーを次のように装着して下さい。

パソコンが起動中で、かつ Image-Pro Insight やその他のソフトが起動していない状態で、プロテクトキーをパソコンの USB ポートに取り付けます (下図)。

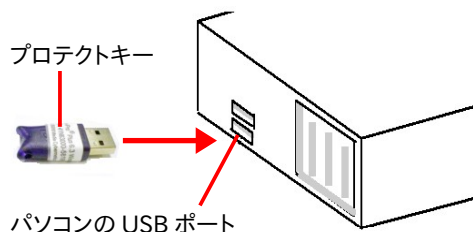

<< 重要 >>

プロテクトキーが静電気で故障する恐れがありますので、キーの金属部分には手を触れずに、プラスチック部

分をつかんで下さい。移動・保管時は、帯電防止袋に入れて下さい。

▶**注記**◀ プロテクトキーは、USB ハブ (キーボードなど) に取り付けることも可能ですが、正しく認識されないことがあるため、ハブでなくパソコン本体の USB ポートに取り付けて下さい。

プロテクトキーを取り付けると、数秒から数十秒後にキーが認識され、ドライバが自動的にインストールされます。Windows のタスクバーに小さく「新しいハードウェアが見つかりました」と表示され、続いてドライバのインストール状況が表示されます。キー内部のランプが点灯すればインストールは完了です。

ランプが点灯します



プロテクトキーのインストールが終了したら、引き続き以下の手順で Image-Pro Insight が正常に起動することをご確認下さい。

## 初回起動

14. プロテクトキーがパソコンの USB ポートに取り付けられていて、プロテクトキーのランプが点灯していることを必ず確認して下さい。

▶**注記**◀ 必ず、Image-Pro Insight を起動する前に、プロテクトキーが取り付けられていることを確認して下さい。Image-Pro Insight が起動している最中や、起動後にプロテクトキーを抜き差しすることは絶対に避けて下さい。(キーの再アクティベーションが必要になることがあります。アクティベーションについては、13 ページをご覧ください)。

15. Windows のデスクトップ上に表示されている "Image-Pro Insight" アイコン (右図) をダブルクリックして、Image-Pro Insight を起動します。

「スタート」メニュー → 「(すべての) プログラム」 → 「Image-Pro Insight」 → 「Image-Pro Insight」をクリックすることでも、Image-Pro Insight を起動できます。



Image-Pro  
Insight

▶**注記**◀ 起動時に次の "Update Error" (アップデートエラー) 画面が表示される場合は、お使いのパソコンがインターネットに接続されていないため、Image-Pro Insight の自動アップデート機能 (10 ページ) が動作しないことを示しています。

自動アップデート機能を使用しない場合に選択します

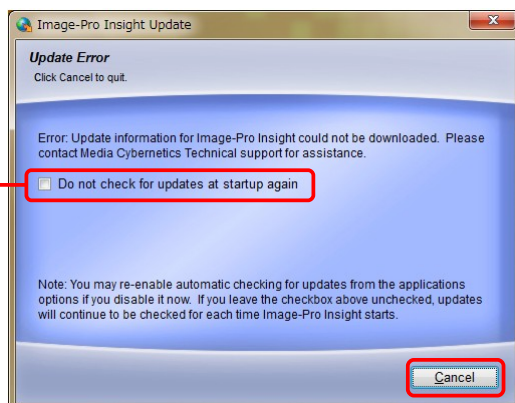


Image-Pro Insight をインターネット接続のない環境でお使いになる場合など、自動アップデート機能を利用されないときは、"Do not check for updates at startup again" (今後は起動時にアップデートの有無を確認しない) オプション (上図) をクリックして選択し、"Cancel" (取り消し) をクリックして下さい。

インターネット接続環境のないパソコンで Image-Pro Insight のアップデートを行なうには、インターネットに接続できる別のパソコンから弊社のウェブサイトへアクセスしていただき、必要なアップデートがあればダウンロードして USB メモリなどに保存し、それを Image-Pro Insight がインストールされているパソコンに渡してインストールしていただく必要があります。アップデートを入手されるには、弊社ウェブサイトの「サポート情報」ページ (<http://www.mediacy.jp/support/support.htm>) または「ダウンロード」ページ (<http://www.mediacy.jp/download/download.htm>) を定期的にチェックして下さい。



Image-Pro Insight が問題なく起動した場合、下図のような画面が開きます。

▶**注記**◀ 起動時にエラーメッセージなどが表示されたり、起動ができない場合は、本書の「トラブルシューティング」(13ページ)をご覧ください。

【Image-Pro Insight の起動画面】

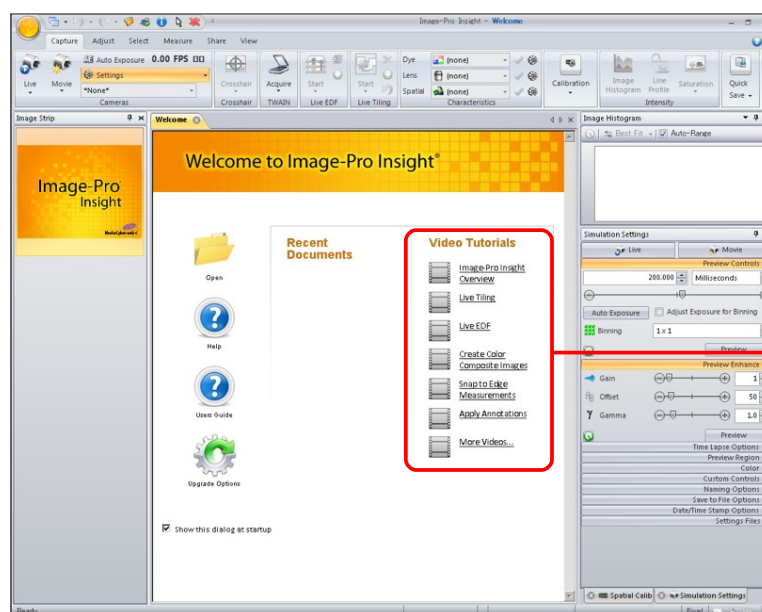


Image-Pro Insight  
の操作方法や機能  
を説明するチュート  
リアルムービー

Image-Pro Insight の操作方法につきましては、「Image-Pro Insight 基本操作マニュアル」をご覧ください。


▶**注記**◀ 上図の "Video Tutorials" (ビデオチュートリアル) 欄のビデオ名をクリックすると、操作説明・機能解説のチュートリアルムービー (解説は英語です) をご覧になれます (17ページの「その他の情報」もご覧ください)。  
"More Videos" のムービーは、パソコンをインターネットに接続されている場合のみ、ご利用になれます。  
ムービーを再生できない場合、Adobe Flash Player を次のウェブページから無償で入手できますので、ダウンロードしてパソコンに組み込んで下さい。

<http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/>


## ▼ 自動アップデート機能について

Image-Pro Insight には自動アップデート機能があり、インターネットに接続されたパソコンでは、自動的に最新のアップデートをインターネット経由でダウンロードします。ダウンロードが終了したら、Image-Pro Insight をいったん終了し、ダウンロードしたアップデートソフトを画面の指示に従ってインストールして下さい。

アップデートソフトをインストールした後は、アクティベーションが必要になることがあります。右図のような画面が表示されたら、"OK" ボタンをクリックして下さい。

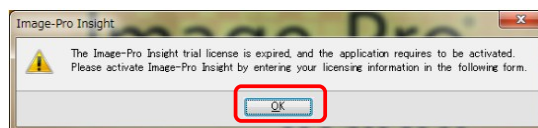


その後、次のような画面が表示されますので、各項目を、半角英数文字 (英語) で入力して下さい ("\*" 印が付いている項目は必須です)。  
"Unlocking Code" (ロック解除コード) は、インストール用 CD-ROM のケースにシールで添付されています。

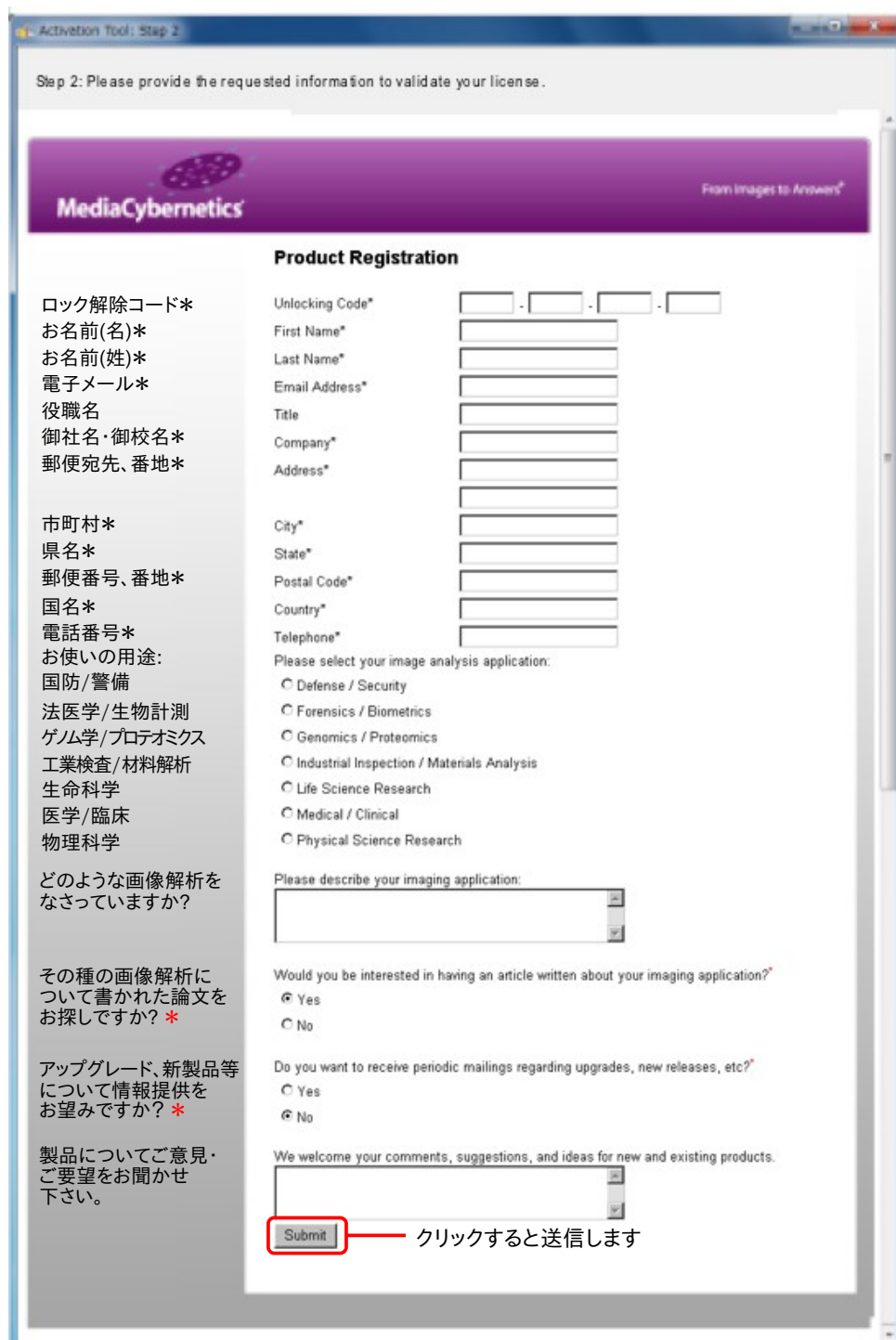A screenshot of the "Activation Tool: Step 2" window for MediaCybernetics. The window title is "Activation Tool: Step 2". Below the title bar, it says "Step 2: Please provide the requested information to validate your license." The main area has a purple header with the MediaCybernetics logo and the tagline "From Images to Answers". The form is titled "Product Registration". It contains several input fields and sections:


- Unlocking Code\***: A field for the product key.
- First Name\***, **Last Name\***, **Email Address\***, **Title**, **Company\***, **Address\***: Fields for user contact information.
- City\***, **State\***, **Postal Code\***, **Country\***, **Telephone\***: Fields for location and contact details.
- Please select your image analysis application:**: A list of radio buttons for selecting the application: Defense / Security, Forensics / Biometrics, Genomics / Proteomics, Industrial Inspection / Materials Analysis, Life Science Research, Medical / Clinical, and Physical Science Research.
- Please describe your imaging application:**: A text area for describing the application.
- Would you be interested in having an article written about your imaging application?**: Radio buttons for Yes and No.
- Do you want to receive periodic mailings regarding upgrades, new releases, etc?**: Radio buttons for Yes and No.
- We welcome your comments, suggestions, and ideas for new and existing products.**: A text area for user feedback.
- Submit**: A button at the bottom left, highlighted with a red rectangle, with a red arrow pointing to it and the text "クリックすると送信します".

On the left side of the form, there are Japanese labels for the fields, some marked with an asterisk (\*). These include: ロック解除コード\*, お名前(名)\*, お名前(姓)\*, 電子メール\*, 役職名, 御社名・御校名\*, 郵便宛先、番地\*, 市町村\*, 県名\*, 郵便番号、番地\*, 国名\*, 電話番号\*, お使いの用途: (国防/警備, 法医学/生物計測, ゲノム学/プロテオミクス, 工業検査/材料解析, 生命科学, 医学/臨床, 物理科学), どのような画像解析をなさっていますか?, その種の画像解析について書かれた論文をお探しますか? \*, アップグレード、新製品等について情報提供をお望みですか? \*, and 製品についてご意見・ご要望をお聞かせ下さい.


入力し終わったら、"Submit" (送信) ボタンをクリックして下さい。これでユーザー登録データが送信されます。  
問題がない場合、これでライセンスファイルが自動的にパソコンにインストールされてアクティベーションが完了し、次の画面が表示されます。

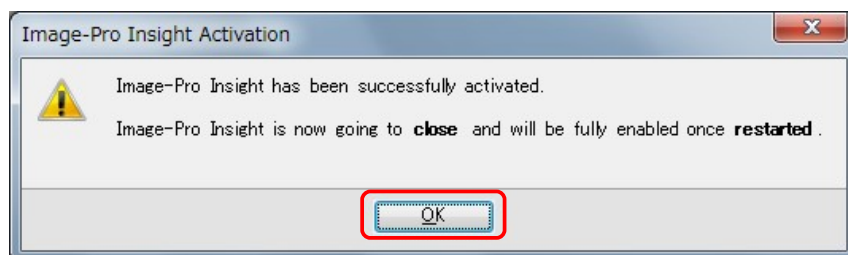

自動アップデート機能を使用したくない場合は、画面左上角のアプリケーションメニューボタン (🔧) をクリックして **Options** ボタンをクリックし、"Image-Pro Insight Options" (Image-Pro Insight のオプション) を開きます。左欄の "Applications" (アプリケーション) を選択し、"Automatic Update Check" (自動アップデートチェック) オプションを非選択にして下さい。

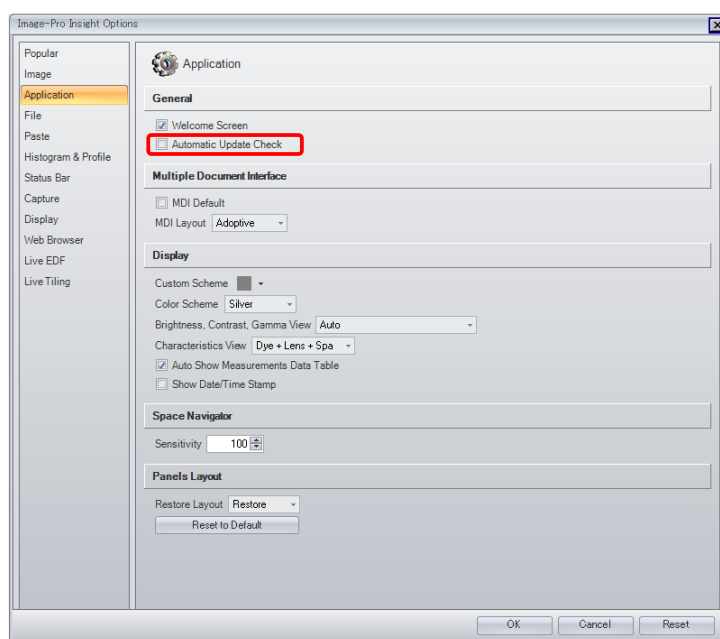

または、次の画面が開いたときに、"Do not check for update at startup again" (起動時にアップデートの有無を確認しない) オプションを選択して下さい。

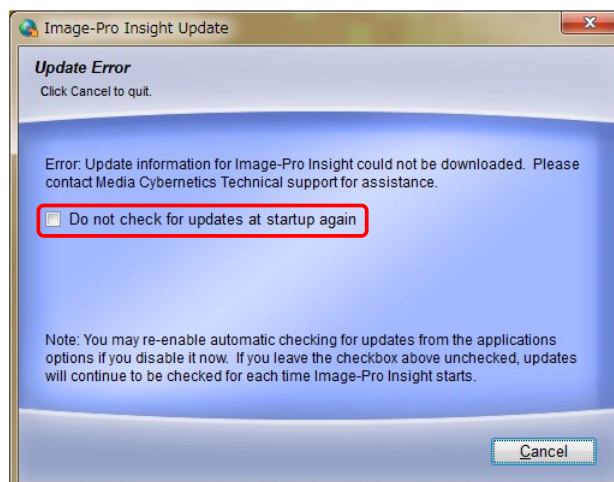

## ▼ 画像取り込みドライバのインストールについて

カメラからの画像取り込みをされる場合は、Image-Pro Insight 本体のインストールに引き続き、画像取り込みドライバのインストールを行なう必要があります。Image-Pro Insight から制御可能なカメラ機種の一覧表は、[http://www.mediacy.com/index.aspx?page=IP\\_Insight\\_hardware](http://www.mediacy.com/index.aspx?page=IP_Insight_hardware) をご覧下さい。

The screenshot shows the MediaCybernetics website's 'Image-Pro Insight Supported Hardware' page. The page is organized into sections for different camera brands: Leica Cameras (listing models like DFC295, DFC425C, DFC425C), Lumenera Cameras (listing models like Infinity 1-2, Infinity 1-3, Infinity 1-5, etc.), Qimaging Cameras (listing models like EXi Blue, EXi Aqua, etc.), and Qimaging Cameras (listing models like Qimaging 7 and 9). A sidebar on the left provides navigation options for products, resources, and support. A 'FREE 30-DAY DEMO' badge is prominently displayed on the right side of the page.


最新のデジタルカメラ用ドライバソフトは、<http://support.mediacy.com/drivers.asp> から入手できます。

The screenshot shows the MediaCybernetics website's 'Technical Support for Media Cybernetics Products' page. The page contains a table listing supported cameras and their drivers. The table has columns for 'Camera Name', 'Version', and 'Supported Camera'. The supported cameras listed include Leica (DFC295, DFC425C, DFC425C), Lumenera (Infinity 1-2, Infinity 1-3, Infinity 1-5, etc.), Qimaging (EXi Blue, EXi Aqua, etc.), and Qimaging (Qimaging 7 and 9). A sidebar on the left provides navigation options for support, resources, and products. The page also includes a 'NOTE' section and a 'Download Drivers' link.

## ▼トラブルシューティング

Image-Pro Insight ver. 8.0 の使用上の問題点と対処方法を以下にまとめています。マニュアルやオンラインヘルプには記載されていない情報もありますので、Image-Pro Insight をご使用の際にご参照下さい。

Q. Image-Pro Insight の起動時に下図のようなエラーメッセージが表示され、Image-Pro Insight が起動しない。

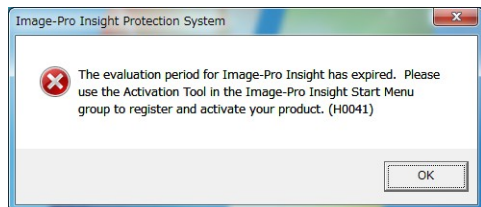

A. このような場合は、次のように処置して下さい。

- Image-Pro Insight を必ずいったん終了して下さい。ここで終了しないと、プロテクトキーのアクティベーション (下記) が必要になることがあります。
- プロテクトキーがパソコンに付いている場合は、プロテクトキーをいったんパソコンから取り外し、パソコンを再起動して下さい。再起動したら、必ず管理者権限でログオンして下さい。
- 抗ウイルスソフトや、他のアプリケーションソフト等を使用されている場合は、ここで必ず終了して下さい。終了する方法は、抗ウイルスソフト等のマニュアルをご覧ください。
- 数秒待ってから、プロテクトキーを再度パソコンに取り付けて下さい。


以上の操作の後、数秒～数十秒後にプロテクトキーのランプが点灯し、プロテクトキーが認識されるはずですが、この状態で Image-Pro Insight を起動して下さい。

ランプが点灯します



▶**注記**◀ プロテクトキーは、Image-Pro Insight が起動していない状態で抜き差しして下さい。Image-Pro Insight の起動中にプロテクトキーを抜き差しすると、キーのアクティベーション (下記) が必要になることがあります。


Q. Image-Pro Insight の起動時に次のようなメッセージが表示される。

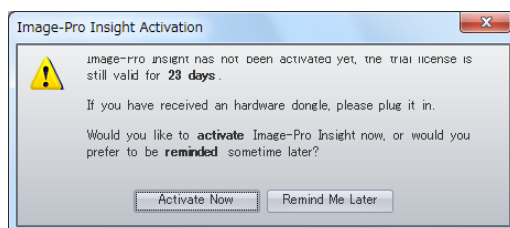

A. このメッセージが表示された場合、製品のユーザー登録をやり直して、Image-Pro Insight のライセンスをアクティベートして頂く必要があります。パソコンがインターネットに接続している場合と接続していない場合で、対処の方法が異なります。


● 【プロテクトキーのアクティベーション: パソコンがインターネットに接続している場合】

- 次のメッセージが表示されたら、"Activate Now" ボタンをクリックして下さい。

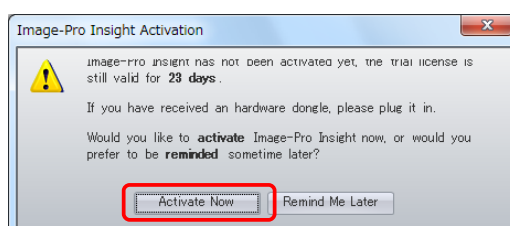



2. "Product Registration" (製品登録) 画面が開きます。各項目を、半角英数文字 (英語) で入力して下さい ("\*" 印が付いている項目は必須です) 。"Unlocking Code" (ロック解除コード) は、インストール用 CD-ROM のケースにシールで添付されています。

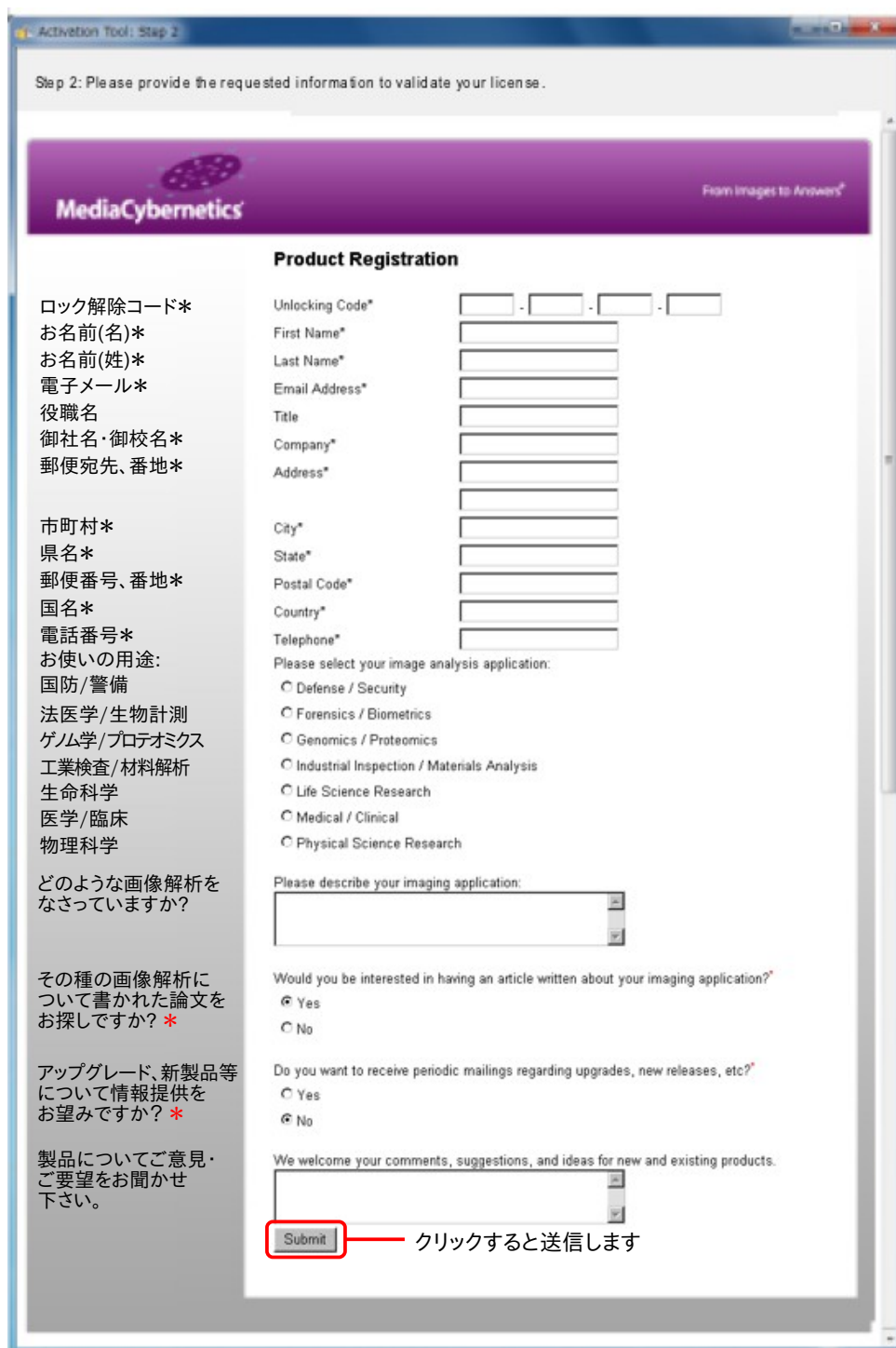

Activation Tool: Step 2

Step 2: Please provide the requested information to validate your license.

MediaCybernetics

From Images to Answers®

### Product Registration

ロック解除コード\*  
お名前(名)\*  
お名前(姓)\*  
電子メール\*  
役職名  
御社名・御校名\*  
郵便宛先、番地\*

市町村\*  
県名\*  
郵便番号、番地\*  
国名\*  
電話番号\*  
お使いの用途:  
国防/警備  
法医学/生物計測  
ゲノム学/プロテオミクス  
工業検査/材料解析  
生命科学  
医学/臨床  
物理科学

どのような画像解析を  
なさっていますか?

その種の画像解析に  
ついて書かれた論文を  
お探しますか? \*

アップグレード、新製品等  
について情報提供を  
お望みですか? \*

製品についてご意見・  
ご要望をお聞かせ  
下さい。

Unlocking Code\*  
First Name\*  
Last Name\*  
Email Address\*  
Title  
Company\*  
Address\*  
City\*  
State\*  
Postal Code\*  
Country\*  
Telephone\*

Please select your image analysis application:

☐ Defense / Security  
☐ Forensics / Biometrics  
☐ Genomics / Proteomics  
☐ Industrial Inspection / Materials Analysis  
☐ Life Science Research  
☐ Medical / Clinical  
☐ Physical Science Research

Please describe your imaging application:

Would you be interested in having an article written about your imaging application?\*

☒ Yes  
☐ No

Do you want to receive periodic mailings regarding upgrades, new releases, etc?\*


☐ Yes  
☒ No

We welcome your comments, suggestions, and ideas for new and existing products.

クリックすると送信します

3. 入力し終わったら、"Submit" (送信) ボタンをクリックして下さい。これでユーザー登録データが送信されます。

問題がない場合、これでライセンスファイルが自動的にパソコンにインストールされてアクティベーションが完了し、次の画面が表示されます。

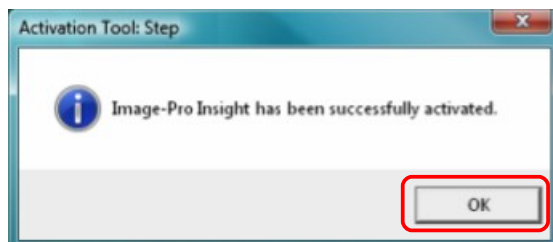


"OK" をクリックして終了して下さい。

これで、Image-Pro Insight が使用可能となります。


● 【プロテクトキーのアクティベーション: パソコンがインターネットに接続していない場合】

Image-Pro Insightを使用するパソコンがインターネットに接続していない場合は、3MB 以上の空き容量のある USB メモリを用意してから、次の手順を実行して下さい。

1. インターネットに接続していないパソコンで次のメッセージが表示されたら、"Activate Now" ボタンをクリックして下さい。

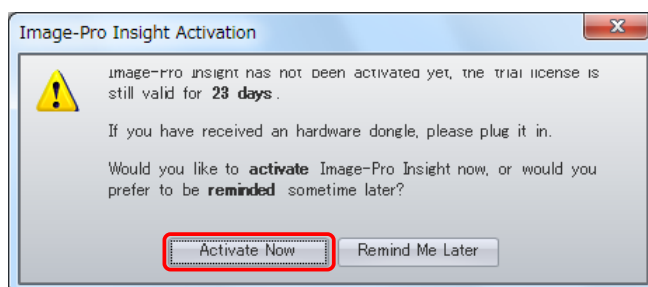

2. 次の画面が開きます。USB メモリをパソコンに取り付けて下さい。

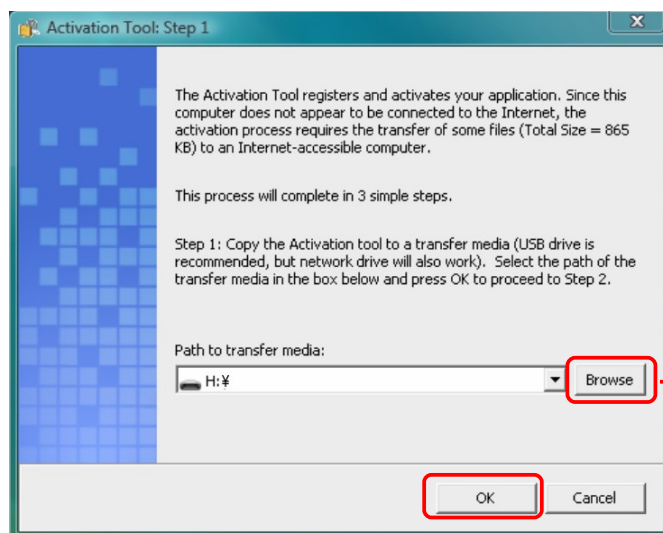


クリックして、USB  
メモリを選択します

3. "Browse" ボタンをクリックして、USB メモリのドライブを選択して下さい (上図)。

選択したら、"OK" ボタンをクリックして下さい。この操作により、ライセンスのアクティベーションを行なう "ActivationTool.exe" その他のファイルが USB メモリにコピーされます。


4. USB メモリをパソコンから取り外し、インターネットに接続している別のパソコンに取り付けて下さい。USB メモリの中の "ActivationTool.exe" が自動的に起動し、右の画面が開きます。

▶**注記**◀ この画面が自動的に開かない場合は、Windows のエクスプローラで USB メモリを開き、その中の "ActivationTool.exe" をダブルクリックして起動して下さい。

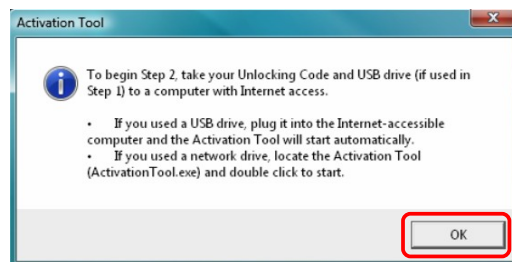


5. "OK" ボタンをクリックします。これで "Product Registration" (製品登録) 画面が開きます (下図)。各項目を、半角英数文字 (英語) で入力して下さい ("\*" 印が付いている項目は必須です)。  
"Unlocking Code" (ロック解除コード) は、インストール用 CD-ROM のケースにシールで添付されています。

6. 入力し終わったら、"Submit" (送信) ボタンをクリックして下さい。これでユーザー登録データが送信されます。
7. 問題がない場合、右の画面が表示されます。"OK" をクリックして下さい。これで、アクティベーションに必要なライセンスファイルが作られ、USB メモリに保存されます。

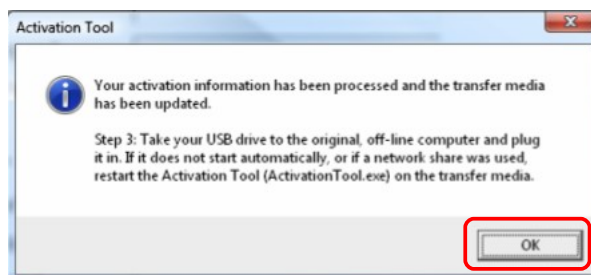

8. USB メモリをパソコンから取り外し、元のパソコン (Image-Pro Insight をインストールした、インターネットに接続されていないパソコン) に取り付けて下さい。
9. これで、USB メモリの中の "ActivationTool.exe" が自動的に起動して、ライセンスファイルが元のパソコンにインストールされます。

問題がない場合、次の画面が表示されます。

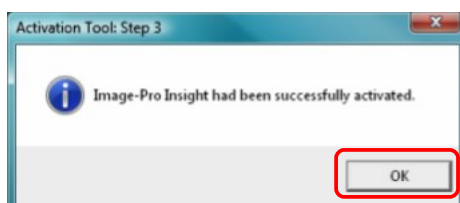

"OK" ボタンをクリックして下さい。

これで、Image-Pro Insight が使用可能になります。

▶注記◀ "ActivationTool.exe" が自動的に起動しない場合は、Windows のエクスプローラで USB メモリを開き、その中の "ActivationTool.exe" をダブルクリックして起動して下さい。

## ▼ その他の情報

- Image-Pro Insight のサポート情報については、弊社ウェブサイト (<http://www.mediacy.jp>) の「サポート」ページをご覧ください。
- Image-Pro Insight の実際の使用例については、起動後の "Welcome" 画面の "Video Tutorials" (ビデオチュートリアル) でチュートリアルムービー (機能解説・操作説明の動画) をご覧になれます (解説は英語です)。また、次のウェブページにもチュートリアルムービーがありますので、ご利用下さい。

<http://www.mediacy.com/index.aspx?page=IPITours>

<http://www.youtube.com/user/MediaCybernetics?blend=1&ob=5%20>

- 最新のデジタルカメラ用ドライバソフトは、開発元 (米国 Media Cybernetics 社) のホームページ <http://support.mediacy.com/drivers.asp> から入手できます。









株 式 会 社   日 本 ロ ー パ ー

メ ディ ア サ イ バ ネ テ ィ ク ス 事 業 部

〒135-0033 東京都 江東区 深川 2-8-19  
サクライビル 3F

TEL 03-5639-2751   FAX 03-5639-2774

Website: <http://www.mediacy.jp>